

# DentalX v9.2へのアップデート手順

**DentalX Mirrorを使用するために、DentalXのバージョンを9.2以上にアップデートします**

iPad画像閲覧ソフト『DentalX Air Due』をお使いの場合


DentalXAirDueは、iOS11に対応していません。

iOS11にアップデート後にご利用いただくためには『DentalX Air Tre』へのアップデートが必要です。


ご不明な点は、カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。

## 1. DentalXとアプリを終了させる


- 1 クライアントで起動しているDentalXを終了し、起動クライアント数が「1」になっているか確認

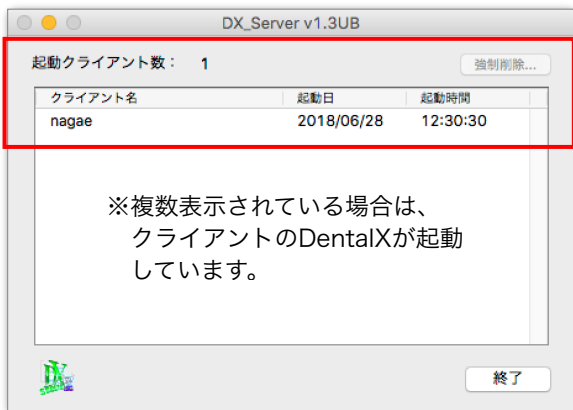

- 2 お使いのDentalXのバージョンを確認

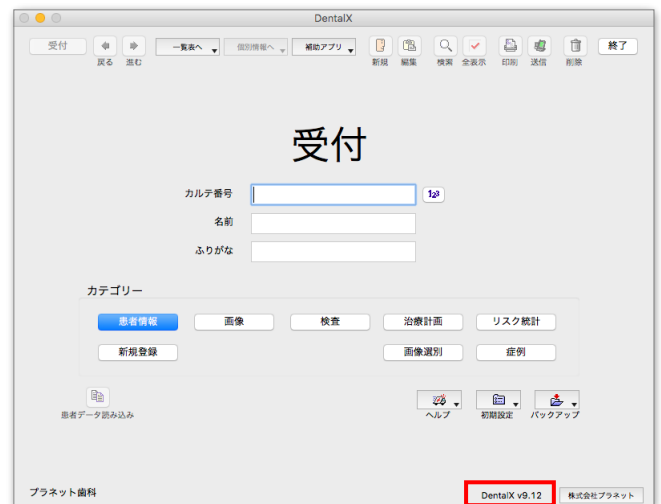

- 3 終了ボタンをクリック

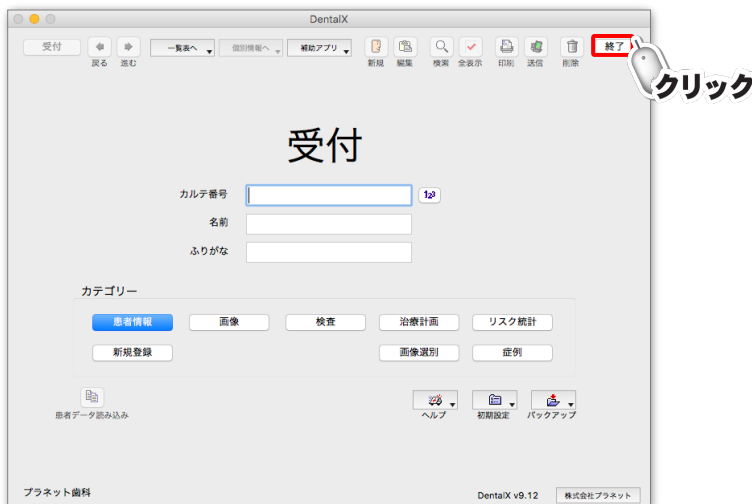

- 4 バックアップ両方ともにチェックを入れてOKをクリック

※お時間がかかりますのでご注意ください



- 5 DentalXアプリ全てを終了する



次のページへ進む

## 2. ダウンロードセンターを開く

1 DockからSafari (サファリ) のアイコンをクリックして起動




2 検索欄に[d7カフェ]と入力して検索



3 D7 partner's Cafeをクリック



4 D7 partner's CafeへのログインIDとパスワードを入力して、ログインボタンをクリック

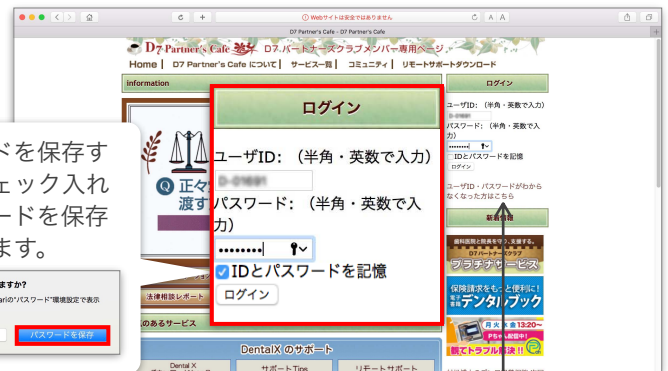

ログインIDとパスワードを忘れたらここをクリック  
 >>> D7 partner's CafeのログインIDとパスワードを確認する

5 ダウンロードセンターをクリック




6 DentalXの受付画面まで下にスクロールする




# 3. アップデータダウンロードする

## 1 DentalX受付画面右下のバージョンを確認し使われているDentalXバージョンを選択

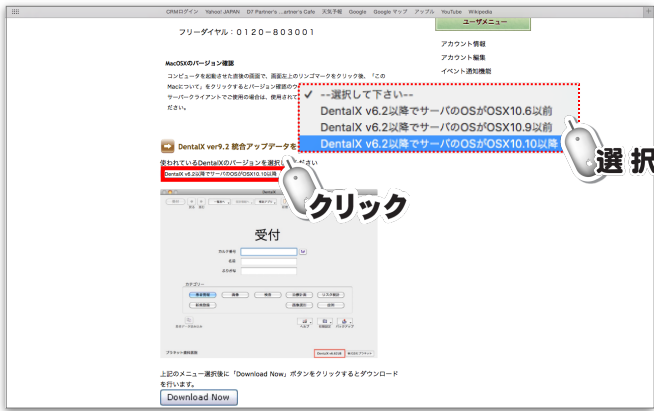


## 2 Download Nowボタンをクリック

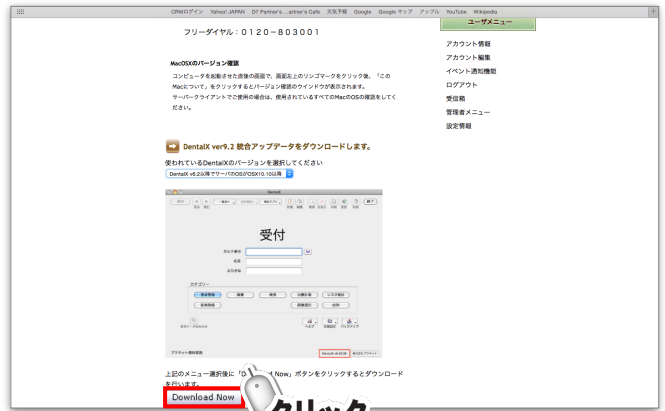

※DentalX v6.2以降でサーバのOSがOSX10.6以前の場合はv9.2へアップデートできません。


## 3 DentalX使用許諾を読み、同意してダウンロードをクリック

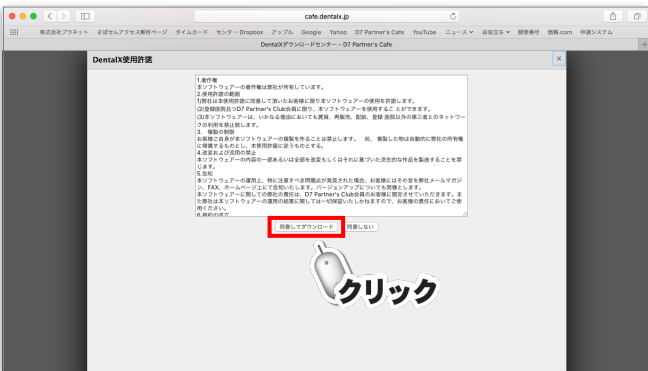

## 4 画面右上の [ダウンロード] ボタンをクリックしてダウンロード状況を確認



## 5 ボタンが [ダウンロード完了] に変わったらダウンロード完了

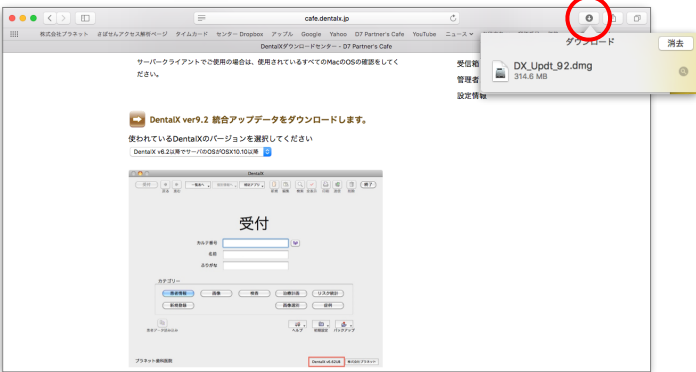


次のページへ進む

## 4. DentalXをアップデートする

### 1 虫眼鏡ボタンをクリック



### 2 ダウンロードフォルダが開き、ファイルをダブルクリックしてデスクトップにできたDX\_Updt\_92のアイコンを開く

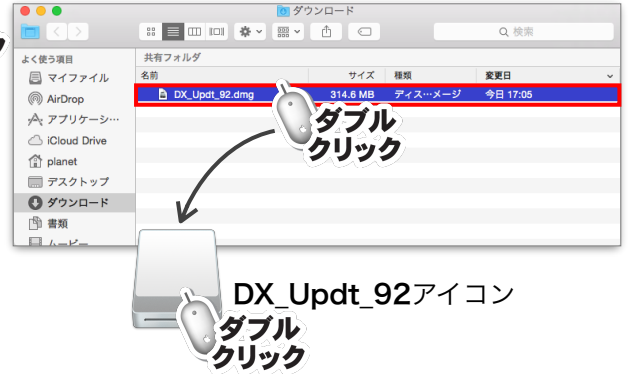

### 3 ウィンドウの中のDX\_Updaterをデスクトップに出す (コピー)



### 4 DX\_Updaterをダブルクリックして、「アップデート開始」ボタンをクリック



## DX\_Updaterを開こうとすると「開発元が未確認のため開けません」の表示が出た場合の対処方法

まず、OKボタンをクリックして、このダイアログの表示を閉じる。




デスクトップに出したアップデートデータを右クリックか、キーボード左側のcontrolキーを押しながらクリックして、メニューから開くを選択。ダイアログが表示されたら、開くボタンをクリック。



次のページへ進む

**5** 「アップデートが終了しました」のダイアログが表示されるので、OKボタンをクリックし、デスクトップ上にあるアップデートをゴミ箱に移動して削除

※ご利用環境により表示が異なる場合があります

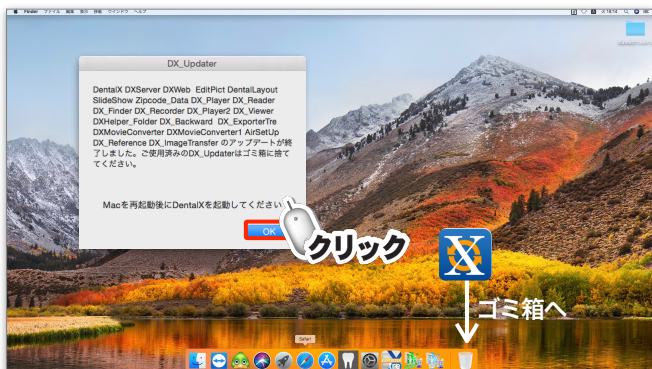

**6** Appleマークをクリックして、メニューから再起動をクリック

※Macが起動するのを待ちます




**7** DentalXのアイコンをクリックして起動



OSが10.13以上のMacをご利用の場合は、DentalX起動時に右図のアラートが出ます。OKボタンをクリックしてください




**8** 受付画面右下のバージョン表示で、DentalXがv9.2にアップデートされているか確認

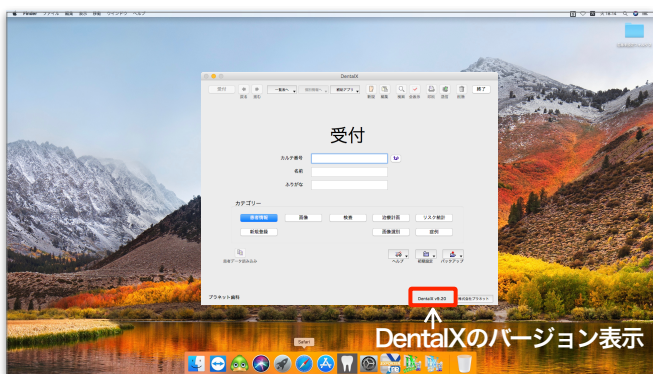

## 5. DentalXとDentalXMirrorの連携

### <DentalXの設定>

**1** DentalX受付画面の初期設定メニューから画像をクリック

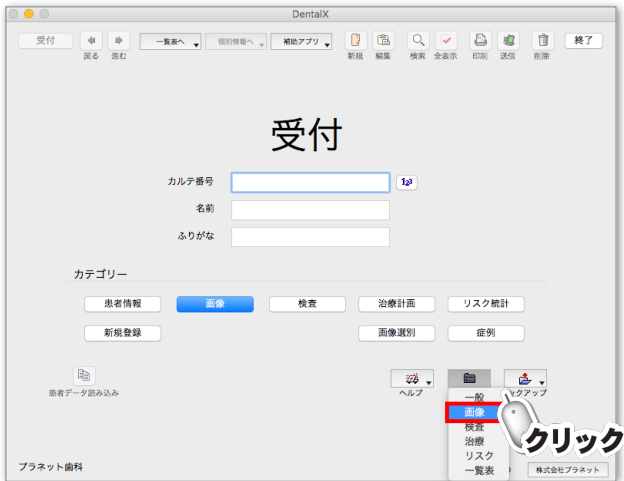


**2** Mirrorタブを開きミラー画像ボタンをクリック



**3** DentalXMirrorの画像取り込みの連携先が作成されるので、OKボタンをクリック



**4** DentalXを終了する

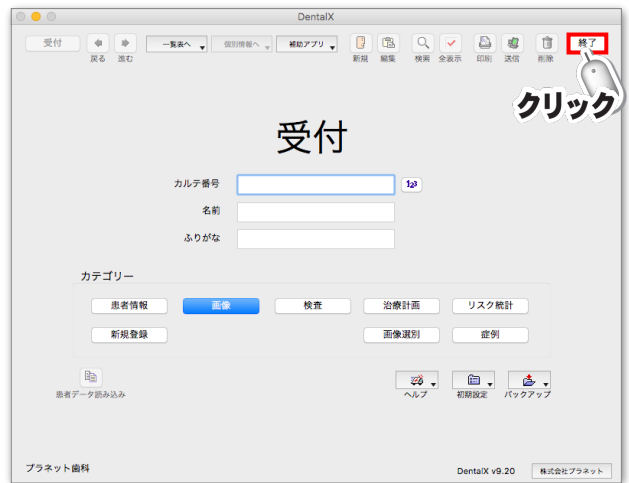


**5** DentalXのアイコンをクリックして再起動する




次のページへ進む

# <DentalXMirrorの設定>


**1** ツールバーのメニューから移動を選択して、ホームをクリック

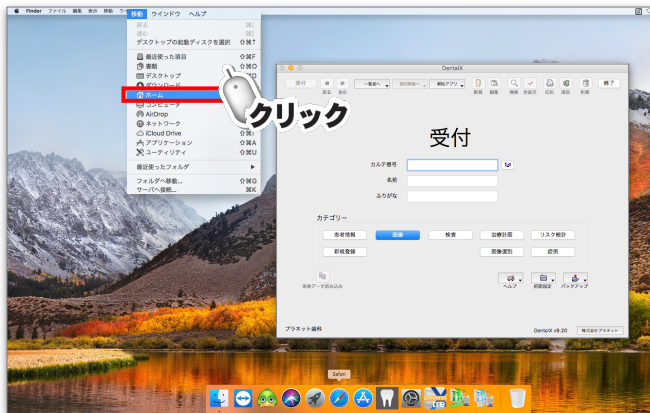


**2** DentalXフォルダをクリックして、Mirror\_Setupをダブルクリック

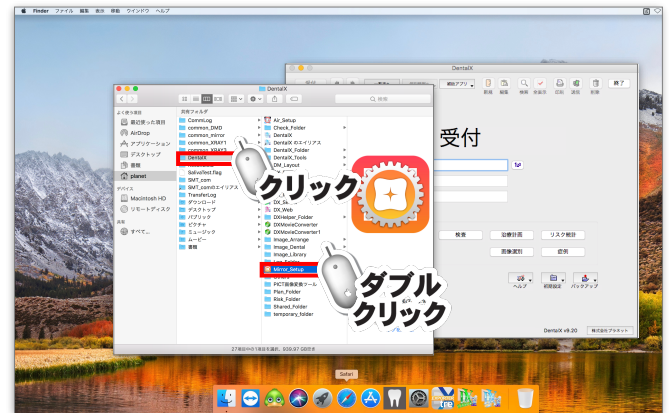

**3** 開始をクリック

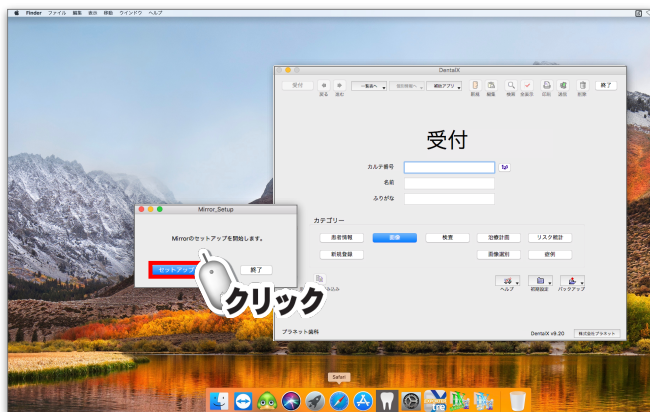

**4** パスワードを入力して、ヘルパーをインストールをクリック

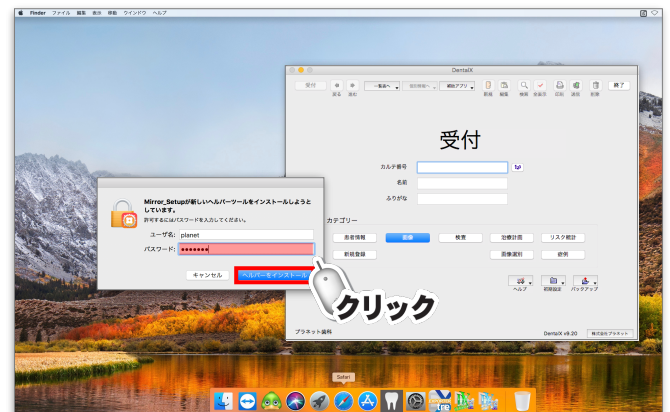

**5** 終了をクリック

